




Allarmi a display LCD – versione modulare



IDENTIFICAZIONE

- ▶ Allarme a display LCD retroilluminato azzurro
- ▶ Possibilità di collegare più moduli identici assieme tramite un solo cavo twistato con configurazione master/slave
- ▶ Disponibilità di 16 ingressi digitali (ON-OFF) per segnalazione allarmi minima e massima pressione
- ▶ Riporto del cumulativo allarmi tramite relè (contatto pulito)
- ▶ Fusibile di protezione integrato
- ▶ Segnalazioni di allarme visivi mediante led rossi lampeggianti ad alta luminosità
- ▶ Segnalazione di allarme acustico ripristinabile automaticamente
- ▶ Presenza di pulsanti per tacitazione suoneria e test
- ▶ Telegestione tramite protocollo MODBUS-RTU
- ▶ Gestione a menù
- ▶ Programmazione tramite pulsanti o tramite PC via link RS 232
- ▶ Sistema con microcontrollore interno

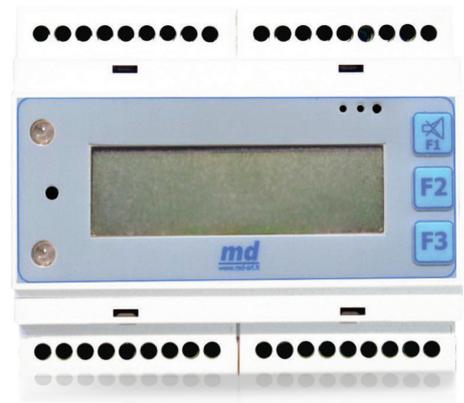

MARCATURA CE

Organismo notificato: CE 0476

Marchatura CE in classe di rischio II B secondo Decreto Legislativo 24 febbraio n° 46 "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici" e s.m.i.

Marchatura CE in conformità alla Direttiva 108/2004/CE EMC

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 7396-1: "Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto"

EN 60601-1: "Apparecchi elettromedicali – Norme generali per la sicurezza"

EN 60601-1-2: "Apparecchi elettromedicali – Compatibilità elettromagnetica"

EN 60601-1-8: "Sistemi di allarme per apparecchiature elettromedicali"

* La validità delle norme è riferita all'anno in corso

- ▶ Gas: Vuoto, Ossigeno, Aria Medica, Protossido d'Azoto, Anidride Carbonica, Aria Strumentale, Aria SDEGA
- ▶ Temperatura di stoccaggio: -20 °C ÷ +60 °C
- ▶ Temperatura di utilizzo: +10 °C ÷ +40 °C
- ▶ Relè 500 mA max 24 V
- ▶ Collegamento master / slave con sistema BUS RS 485
- ▶ Tensione di alimentazione:
cod. **AQ-2512-0000:**
230 V AC - 50 Hz - 4 VA
Fusibile 100 mA (FAST)
cod. **AQ-2512-0001:**
24V AC - 50 Hz - 4 VA
Fusibile 1A (FAST)
- ▶ Dimensioni allarme, imballo, peso:
(cod. **AQ-2512-000x**):
16.5 x 11.5 x 8.8 cm, scatola, 0.42 Kg
- ▶ Soggetto a decreto RAEE

VISUALIZZATORI LCD MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE	REGISTRAZIONE REPERTORIO D.M.	
		CND	D.M.
AQ-2512-0001	Visualizzatore Lcd 16x2, UNI EN 475, alim. 24 V ac, riporti statici 16 on/off	Z120309	275064
AQ-2512-0000	Visualizzatore Lcd 16x2 UNI EN 475, alim. 230 V ac riporti statici 16 on/off	Z120309	275064

CASSETTE DI CONTENIMENTO ALLARMI MODULARI

CODICE	DESCRIZIONE	SCATOLA
AQ-2100-1000	Cassetta da incasso IP 40 con frontale in plexiglass per allarme 6 moduli DIN	20 x 17 x 10cm 0.42 Kg
AQ-2100-2000	Cassetta da esterno IP 65 con frontale in plexiglass per allarme 6 moduli DIN	21 x 20 x 10.5 cm 0.68 Kg

