



Flussimetri per ossigenoterapia

IDENTIFICAZIONE

- ▶ Flussimetri per la misurazione del flusso dei gas medicali per impianti centralizzati
- ▶ Corpo in ottone nichelato
- ▶ Forniti in versione singola o doppia
- ▶ Predisposti per essere collegati ad un innesto per la connessione diretta all'unità terminale di distribuzione gas medicali o su barra portastrumenti (con kit KT-2640-00O2)
- ▶ Filtro posizionato all'ingresso della buretta per la protezione del paziente e del flussimetro
- ▶ Regolazione del flusso del gas attraverso volantino
- ▶ Lettura immediata della portata distribuita attraverso la scala graduata riportata sulla buretta
- ▶ Marcatura laser sul corpo del flussimetro del lotto di produzione



MARCATURA CE

Flussimetri:

Organismo notificato 0426

Marcatura CE in classe di rischio II A secondo Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici" e s.m.i.

Innesti:

Vedi scheda "Innesti per unità terminali" sezione "Unità terminali"

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 15002: "Dispositivi per la misurazione del flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali"

UNI EN ISO 15001: "Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare. Compatibilità con l'ossigeno"

*La validità delle norme è riferita all'anno in corso



REGISTRAZIONE REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI

FABBRICANTE	D.M.	CND	GMDN
8636	99418/R	Z12159099	37132

- ▶ Gas: Ossigeno, Aria, CO₂
- ▶ Scala di misura: 0 ÷ 15 l/min
- ▶ Precisione di misura: ± 10%
- ▶ Portata massima: 20 l/min
- ▶ Limiti pressione di alimentazione:
P_{min} = 400 kPa; P_{max} = 500 kPa
- ▶ Temperatura di utilizzo: +10 °C ÷ +40 °C
- ▶ Temperatura di stoccaggio: -20 °C ÷ +60 °C
- ▶ Attacco all'innesto: G1/4" F


- ▶ Attacco all'umidificatore: 1/4" umidificatore autoclavabile; 9/16" umidificatore monouso
- ▶ Risoluzione: 0,5 l/min tra 0 e 6 l/min
- ▶ Risoluzione: 1 l/min tra 6 l/min e 15 l/min
- ▶ Filtro sinterizzato in ingresso con grana 24 µm
- ▶ Flussimetro singolo cod. **PF-2600-yyyy**
Confezione, dimensioni: Scatola, 18,5 x 16,5 x 5,5 cm
- ▶ Flussimetro doppio cod. **PF-2610-yyyy**
Confezione, dimensioni: Scatola, 21 x 19 x 17,5 cm






Flussimetri per ossigenoterapia

DIMENSIONI

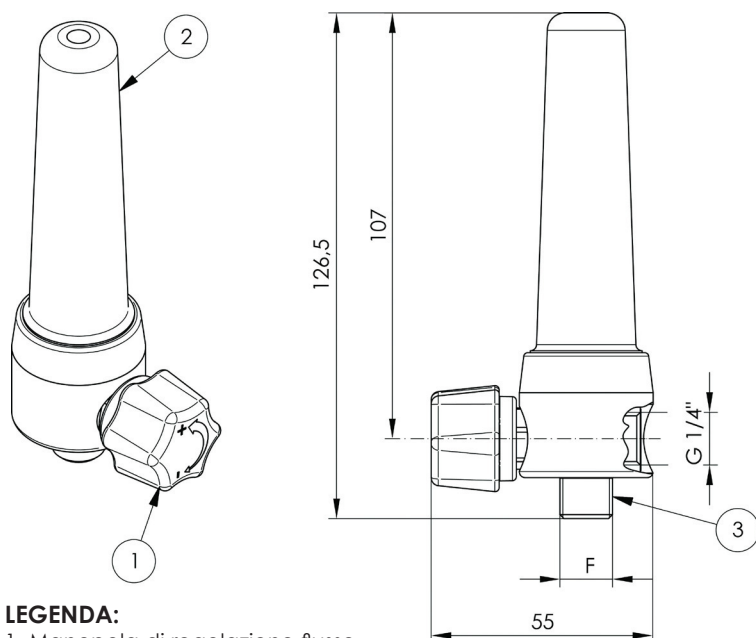**LEGENDA:**

1. Manopola di regolazione flusso
2. Buretta
3. Connessione di uscita
4. Flussimetro doppio

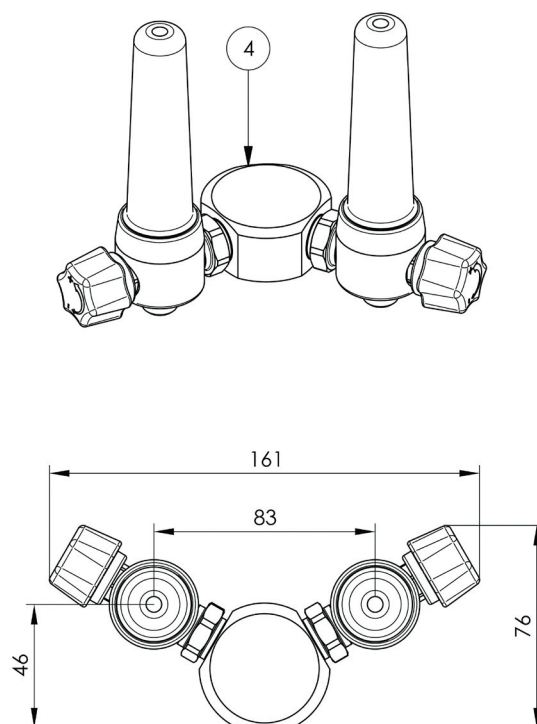

FLUSSIMETRI

TIPO	GAS	CODICE	CONNESSIONE IN USCITA	IMBALLO		
				confezione	kg	pz
Flussimetro singolo	Ossigeno	PF-2600-14O2	G 1/4"	scatola	0.21	1
		PF-2600-96O2	9/16"	scatola	0.21	1
	Aria Medica	PF-2600-14AC	G 1/4"	scatola	0.21	1
		PF-2600-96AC	9/16"	scatola	0.21	1
	Anidride Carbonica	PF-2600-14CO	G 1/4"	scatola	0.21	1
		PF-2600-96CO	9/16"	scatola	0.21	1
Flussimetro doppio	Ossigeno	PF-2610-14O2	G 1/4"	scatola	0.51	1
		PF-2610-96O2	9/16"	scatola	0.51	1
	Aria Medica	PF-2610-14AC	G 1/4"	scatola	0.51	1
		PF-2610-96AC	9/16"	scatola	0.51	1
	Anidride Carbonica	PF-2610-14CO	G 1/4"	scatola	0.51	1
		PF-2610-96CO	9/16"	scatola	0.51	1

INNESTI PER FLUSSIMETRI

GAS	CODICI / NORMATIVA DI RIFERIMENTO			
	AFNOR NF S 90-116	UNI 9507	DIN 13260-2	BS 5682
Ossigeno	PF-06AF-20O2	PF-06UF-20O2	PF-06DF-20O2	PF-06BF-20O2
Aria medica	PF-06AF-20AC	PF-06UF-20AC	PF-06DF-20AC	PF-06BF-20AC
Anidride Carbonica	PF-06AF-2CO2	PF-06UF-2CO2	PF-06DF-2CO2	-

