



Humidificateurs pour débitmètres d'oxygénothérapie

DESCRIPTION

- ▶ Humidificateur pour oxygénothérapie prévu pour contenir de l'eau déminéralisée utilisée pour augmenter l'humidité relative de l'oxygène à administrer
- ▶ Bocal en polycarbonate autoclavable
- ▶ Bouchon en matériau plastique autoclavable
- ▶ Tuyau interne en silicone avec embout doté de filtre pour la diffusion de gaz dans l'eau
- ▶ Embout positionné sur le bouchon de l'humidificateur pour le raccordement aux dispositifs d'administration au patient (masque, cathéter nasal, etc.)
- ▶ Indication de la limite de remplissage d'eau, outre les indications de sécurité
- ▶ Humidificateur exempt de latex (latex safe)

MARQUAGE CE

Organisme notifié 0426

Marquage CE en classe de risque II A conformément au Décret législatif n°46 du 24 février 1997 « Application de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux » et amendements successifs

NORMES DE RÉFÉRENCE

UNI 11341: "Humidificateurs à gargouillement à usage médical – exigences essentielles"

*La validité des normes se réfère à l'année en cours.


- ▶ Capacité 250 cc
- ▶ Raccordement au débitmètre avec raccord fileté en laiton nickelé (G 1/4" ou 9/16")
- ▶ Pression maximale : 500 Kpa
- ▶ Débit maximal : 20 l/min.
- ▶ Stérilisation en autoclave à une température de 121°C
- ▶ Durée du cycle de stérilisation : 20 min.





Humidificateurs pour débitmètres d'oxygénothérapie

DIMENSIONS

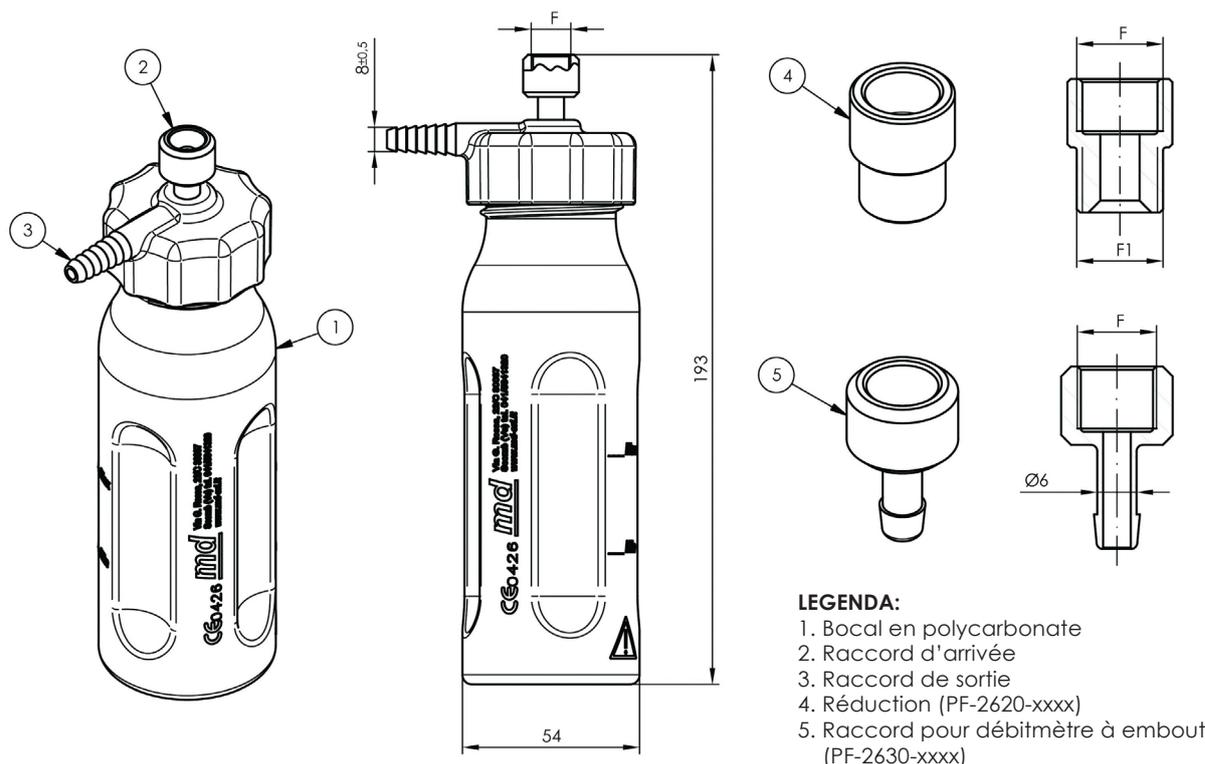

LEGENDA:

1. Bocal en polycarbonate
2. Raccord d'arrivée
3. Raccord de sortie
4. Réduction (PF-2620-xxxx)
5. Raccord pour débitmètre à embout (PF-2630-xxxx)

HUMIDIFICATEUR

CODE	DESCRIPTION	F	F1	EMBALLAGE	
				conditionnement	kg
PF-270P-0000	Humidificateur avec raccord G 1/4"	G 1/4"	–	sachet	0.11
PF-270P-0916	Humidificateur avec raccord 9/16"	9/16"	–	sachet	0.11

REDUCTIONS ET RACCORDS POUR HUMIDIFICATEUR

CODE	DESCRIPTION	F	F1	EMBALLAGE	
				conditionnement	kg
PF-2620-9600	Réduction pour débitmètre G 1/4" – 9/16"	G 1/4"	9/16"	sachet	0.02
PF-2620-1400	Réduction pour débitmètre 9/16" – G 1/4"	9/16"	G 1/4"	sachet	0.02
PF-2630-1400	Raccord G 1/4" pour débitmètre à embout	G 1/4"	–	sachet	0.02
PF-2630-9600	Raccord 9/16" pour débitmètre à embout	9/16"	–	sachet	0.02

