




Prises murales d'air pour instruments

DESCRIPTION

- ▶ Prise murale pour air comprimé à pression nominale de 8,0 bar pour instruments
- ▶ Bloc de base doté de raccord à souder-braser avec joint mécanique ou embout
- ▶ Bloc de base réalisé en laiton, doté de dispositif anti-retour empêchant le retour du flux de gaz sous pression et de bouchon pour les tests d'étanchéité
- ▶ Bloc de base prévu pour le branchement équipotentiel de terre
- ▶ Prise réalisée en laiton nickelé à conformation spécifique (NIST)
- ▶ Prise également disponible en version majorée pour applications particulières
- ▶ Fourni avec 3 vis de fixation M5
- ▶ Possibilité d'installation murale, sous boîtier à encastrer ou externe, ou sur paroi technique
- ▶ Marquage laser du lot de production et du code produit

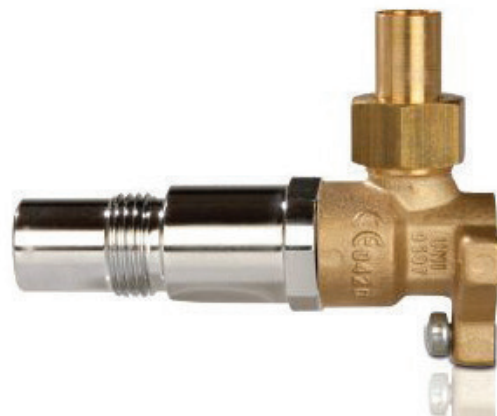

MARQUAGE CE

Organisme notifié : CE 0426

Marquage CE en classe de risque II B conformément au Décret législatif n°46 du 24 février 1997 « Application de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux » et amendements successifs.



NORMES DE RÉFÉRENCE

ISO 9170-1: "Prises murales pour systèmes de distribution de gaz médicaux. Partie 1 : Prises murales pour gaz médicaux comprimés et pour vide"

ISO 5359: "Flexibles de raccordement à basse pour utilisation avec gaz médicaux"

ISO 7396-1: "Systèmes de distribution des gaz médicaux - Partie 1 : Systèmes de distribution des gaz médicaux comprimés et de vide"

ISO 15001: "Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire. Compatibilité avec l'oxygène"

* La validité des normes se réfère à l'année en cours

- ▶ GAZ: Air pour instruments
- ▶ Température de stockage: -20 °C ÷ +60 °C
- ▶ Température d'utilisation: +10 °C ÷ +40 °C
- ▶ Pression nominale de service: 8,0⁺²⁰_{-1,0} bar

- ▶ Joint torique entre bloc de base et prise en NBR
- ▶ Raccordement avec tuyau à souder Ø ext.= 10 mm
- ▶ Raccordement à l'embout avec tuyau flexible Ø int. = 6 ÷ 6,5 mm








Prises murales d'air pour instruments

DIMENSIONS

BASE AVEC RACCORD A SOUDER

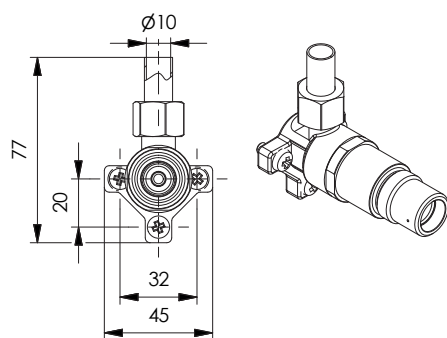


BASE AVEC EMBOUT

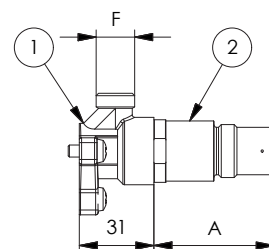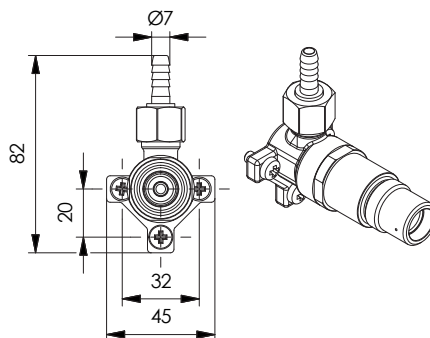

LEGENDA:



- 1. Bloc de base
- 2. Prise

INSTALLATION SUR PAROI TECHNIQUE

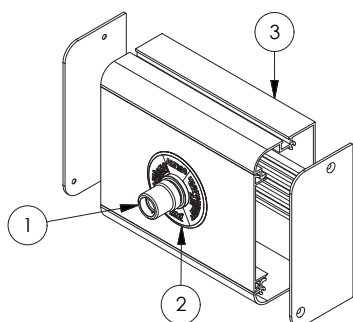

LEGENDA:

- 1. Prise NIST d'air pour instruments
- 2. Anneau d'identification PL-23N0-1AC8
- 3. Extrudé AQ-3400-xxxx (sur demande)
- 4. Base pour d'air pour instruments
- 5. 3 vis M5 (incluses dans la fourniture)

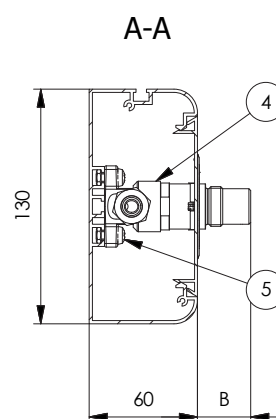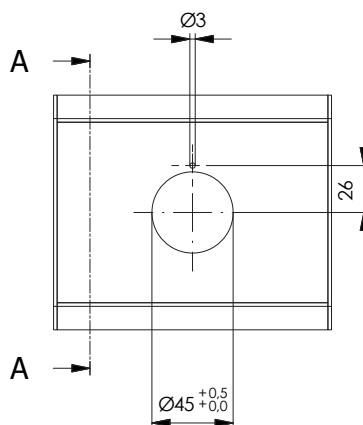

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS		EMBALLAGE		
		A mm	B mm	conditionnement	kg	pc
PF-01US-0AC8	Bloc de base avec raccord à souder	-	-	sachet	0.21	1
PF-01UP-0AC8	Base block with embout	-	-	sachet	0.21	1
PF-02NU-0AC8	Prise NIST standard	50	50 ÷ 55	sachet	0.17	1
PF-02NU-1AC8	Prise NIST majorée	56.5	56 ÷ 61	sachet	0.19	1

