



Prises murales SEGA, type 1, passive

DESCRIPTION

- ▶ Prise murale de TYPE 1 passive pour systèmes d'évacuation des gaz d'anesthésie à pompe centralisée
- ▶ Possibilité de réglage de la pression négative directement sur le bloc de base
- ▶ Identification par une couleur spécifique et marquage CE relatif au fabricant sur l'anneau de décrochage
- ▶ Possibilité d'installation murale, sous boîtier à encastrer ou externe, ou sur paroi technique
- ▶ Bloc de base prévu pour le branchement équipotentiel de terre
- ▶ Bloc de base réalisé en laiton
- ▶ Prise réalisée en laiton nickelé
- ▶ Dotée de tuyau en cuivre de raccordement au circuit
- ▶ Fournie avec vis de fixation M5
- ▶ Possibilité de réglage des performances en modalité 1L ou 1H (directement effectué par l'utilisateur)
- ▶ Marquage laser du lot de production et du code produit

MARQUAGE CE

Organisme notifié : CE 0426

Marquage CE en classe de risque II A conformément au Décret législatif n°46 du 24 février 1997 « Application de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux » et amendements successifs



NORMES DE RÉFÉRENCE

ISO 9170-2: "Prises murales pour systèmes de distribution de gaz médicaux. Partie 2 : Prises murales pour systèmes d'évacuation des gaz d'anesthésie"

ISO 7396-2: "Systèmes de distribution des gaz médicaux. Partie 2 : Systèmes d'évacuation des gaz d'anesthésie"

* La validité des normes se réfère à l'année en cours

- ▶ GAZ: évacuation gaz d'anesthésie
- ▶ Température de stockage: -20 °C ÷ +60 °C
- ▶ Température d'utilisation: +10 °C ÷ +40 °C
- ▶ Pression nominale d'évacuation: -15 kPa




- ▶ Raccordement au conduit d'évacuation avec tuyau en cuivre à soudo-braser Ø=16 mm
- ▶ Fixation de la base au moyen de 2 vis M5x12 (no. 2)
- ▶ Branchement équipotentiel à la prise de terre au moyen de 1 vis M5x5 (no. 1)





Prises murales SEGA, type 1, passive


DIMENSIONS

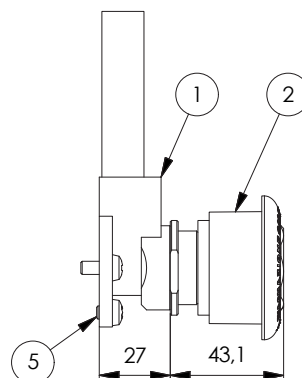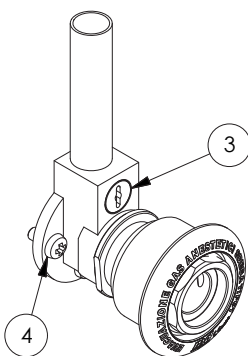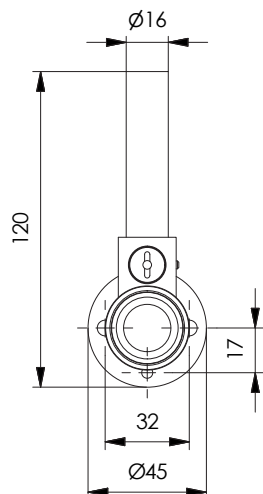

LEGENDA:



- 1. Bloc de base
- 2. Prise
- 3. Vanne de réglage du débit
- 4. 2 vis M5x12 de fixation
- 5. Vis M5x6 de branchement à la terre

INSTALLATION SUR PAROI TECHNIQUE

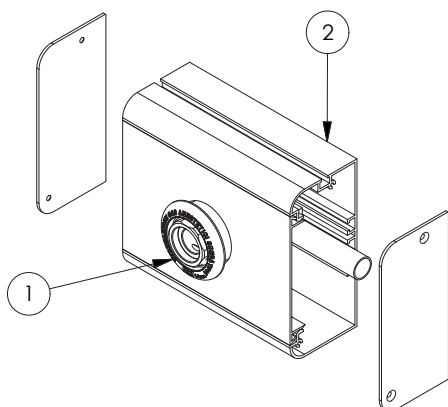

LEGENDA:

- 1. Prise
- 2. Extrudé en aluminium AQ-3400-xxxx (sur demande)
- 3. Bloc de base

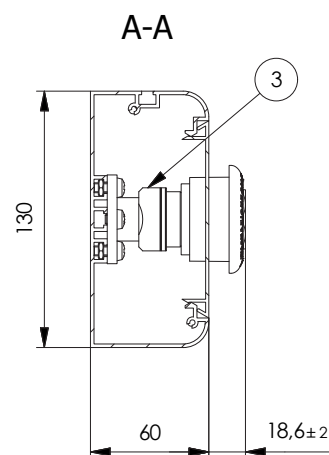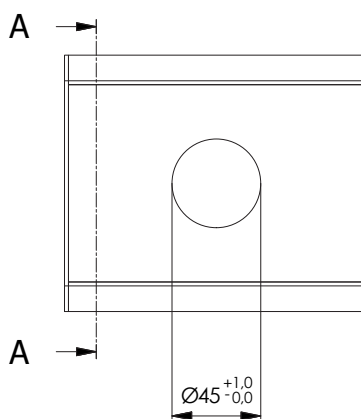

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE		
		conditionnement	kg	pc
PF-01ES-00EV	Bloc de base pour évacuation de gaz d'anesthésie - Type 1 passive pour systèmes à pompe	sachet	0.26	1
PF-02EE-00EV	Prise d'évacuation de gaz d'anesthésie Type 1 passive pour systèmes à pompe	sachet	0.18	1

