


Quadri per soluzioni integrate (gruppi di riduzione pressione e valvole di sezionamento)

CARPENTERIE

- ▶ Casseta in versione da incasso per l'installazione combinata di riduttori di pressione di linea (modelli PF-05xx-yyyy o PF-37xx-yyyy con blocco area integrato) e valvole a sfera di intercettazione per la gestione dello stato di servizio delle reti di distribuzione dei gas medicali
- ▶ Porta con serratura e oblò trasparenti con plexiglass a rompere per ciascuna linea gas/vuoto
- ▶ Alloggiamento integrato di scheda d'allarme
- ▶ Predisposizione per collegamento al nodo equipotenziale di messa a terra
- ▶ Dotazione di lamiera a perdere per operazioni di incasso
- ▶ Possibilità di fornitura del quadro assemblato
- ▶ Possibilità di personalizzazione della carpenteria secondo le esigenze del cliente



DIMENSIONI

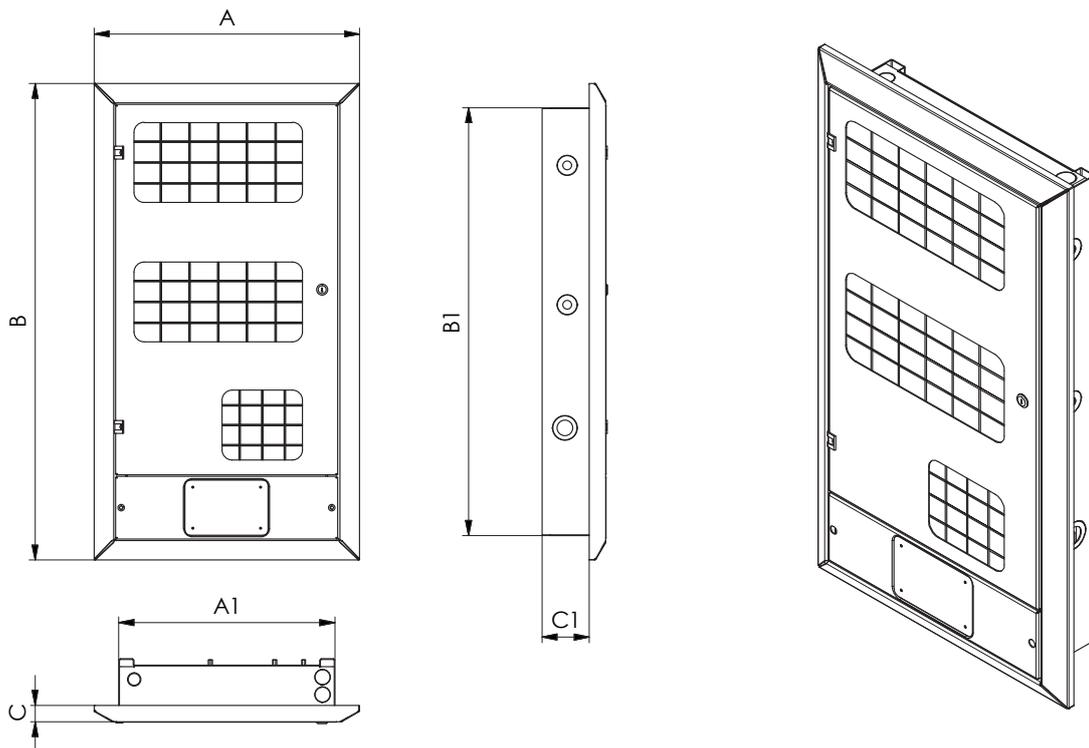

CODICE	N. GAS	DIMENSIONI						IMBALLO		
		DIMENSIONI FINITE			DIMENSIONI INCASSO			confezione	cm	kg
A mm	B mm	C mm	A1 mm	B1 mm	C1* mm					
CA-0501-3000	1 gas + vuoto	530	680	30	430	580	100 ± 5	scatola	57 x 72 x 18	12.8
CA-0502-3000	2 gas + vuoto	530	960	30	430	860	100 ± 5	scatola	57 x 100 x 18	17.5
CA-0503-3000	3 gas + vuoto	530	1240	30	430	1140	100 ± 5	scatola	57 x 128 x 18	22.2
CA-0504-3000	4 gas + vuoto	530	1520	30	430	1420	100 ± 5	scatola	57 x 156 x 18	26.9

* profondità dell'incasso, rispettare le tolleranze indicate.

