




Quadro di emergenza e gestione impianto versione compatta

DESCRIZIONE

- ▶ Quadro di gestione generale linee di distribuzione gas medicale
- ▶ Realizzazione in carpenteria da esterno acciaio INOX AISI 430
- ▶ Punto di alimentazione per manovre di emergenza o manutenzione tipo NIST gas specifico dotato di dispositivo di non ritorno.
- ▶ Valvola di sicurezza a protezione dell' impianto in operazioni di emergenza
- ▶ Monitoraggio della pressione di linea mediante trasduttori di pressione o pressostati a scelta.
- ▶ Manometro per l' indicazione della pressione di linea

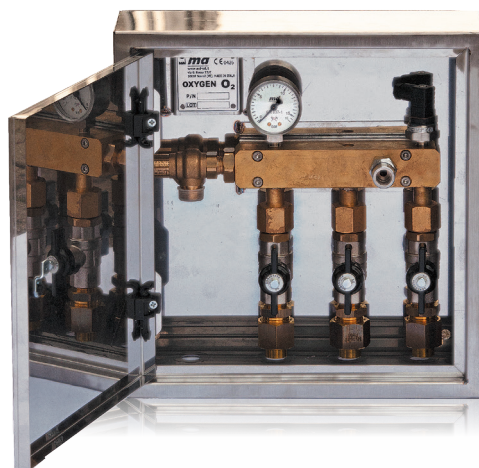

MARCATURA CE

Organismo Notificato: 0426

Marcatura CE in classe di rischio II B secondo Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46

"Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici" e s.m.i. .

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 7396-1 "Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione gas medicali compressi e per vuoto"

UNI EN ISO 15001 "Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare - Compatibilità con l'ossigeno".

*La validità delle norme è riferita all'anno in corso

PF-4900-1xxx ; PF-4901-1xxx VERSIONE COMPATTA

- ▶ Collettore con tubazione in rame. Predisposizione tubazioni in ingresso/uscita Ø= 22 x 1 mm Ø=16x1 mm
- ▶ Valvola di sicurezza pretarata*
- ▶ Classe di precisione e scala manometri: 2,5 ; 0 ÷ 16 bar
- ▶ Portata valvola di sicurezza Q= 365 Nm³/h (Aria)
- ▶ Connessione per attacco trasduttore di pressione: G 1/4"
- ▶ Connessione per attacco pressostato: G 1/8"
- ▶ Punti di non ritorno in ingresso valvola di sicurezza



*14 bar per centrali a singolo stadio Rif. PF-4900-1XXX
5.5 bar per centrali doppio stadio Rif. PF-4901-1XXX





Quadro di emergenza e gestione impianto versione compatta

DIMENSIONI

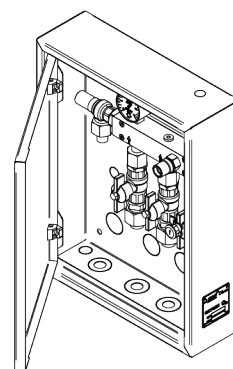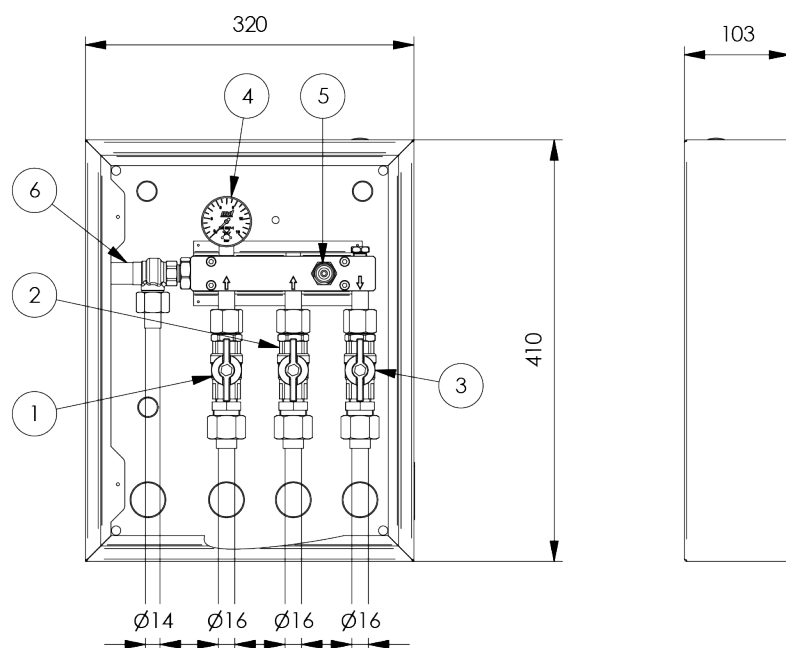

LEGENDA:

1. Valvola G1/2" ingresso fonte principale
2. Valvola G1/2" ingresso fonte di riserva
3. Valvola G1/2" linea di uscita
4. Manometro 0-16 bar linea di uscita
5. Punto di alimentazione NIST gas specifico
6. Valvola di sicurezza

CODICE	GAS	VERSIONE	OPZIONI		CONFEZIONE		
			PRESSOSTATO	TRASDUTTORI	 confezione	 cm	 Kg
PF-4900-10O2	O ₂	COMPATTA	6,4-9,6 bar KT-2200-2000*	0-16 bar KT-2210-0016	scatola	16,3 x 38,0 x 47,0	8,5
PF-4900-10AC	Air						
PF-4900-1N2O	N ₂ O						
PF-4900-1CO2	CO ₂						
PF-4901-10O2	O ₂		3,2-4,8 bar KT-2200-1000*				
PF-4901-10AC	Aria						
PF-4901-1N2O	N ₂ O						
PF-4901-1CO2	CO ₂						

* Connettore escluso

Disponibili connettori con cavo L = 1,5 m (codice MP-2200-3000) e L = 2,5 m (codice MP-2200-4000)

