



Regolatori del vuoto



IDENTIFICAZIONE

- ▶ Regolatori di vuoto per misurazione e regolazione livello di depressione per aspirazione endocavitaria
- ▶ Livello di depressione regolato attraverso apposita leva con modalità di funzionamento ON tutta apertura (massima aspirazione), OFF interruzione del flusso, REG regolazione tramite volantino su modelli 0-1000 mbar
- ▶ Livello di depressione regolato attraverso apposita leva con modalità di funzionamento OFF interruzione del flusso, REG regolazione tramite volantino su modelli 0-600 mbar e 0-250 mbar
- ▶ Protezione del manometro all'interno di una struttura compatta
- ▶ Connessione diretta all'unità terminale o su barra portastrumenti
- ▶ Predisposizione per attacco rapido con vaso di sicurezza
- ▶ Disponibile in diverse colorazioni su richiesta
- ▶ Marcatura laser su corpo del regolatore del lotto di produzione del codice prodotto e della data (mese e anno) di fabbricazione

MARCATURA CE

Regolatore vuoto e Portagomma:

Organismo Notificato: 0426

Marcatura CE in classe di rischio II A secondo Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici" e s.m.i.

Innesti:

Vedi scheda "Innesti per unità terminali" sezione "Unità terminali"

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 10079-3: "Aspiratori per uso medico – Aspiratori azionati da una sorgente di vuoto o di pressione"

*La validità delle norme è riferita all'anno in corso



REGISTRAZIONE REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI


FABBRICANTE	D.M.	CND	GMDN
8636	101654/R	Z120309	44809





Regolatori del vuoto

DIMENSIONI

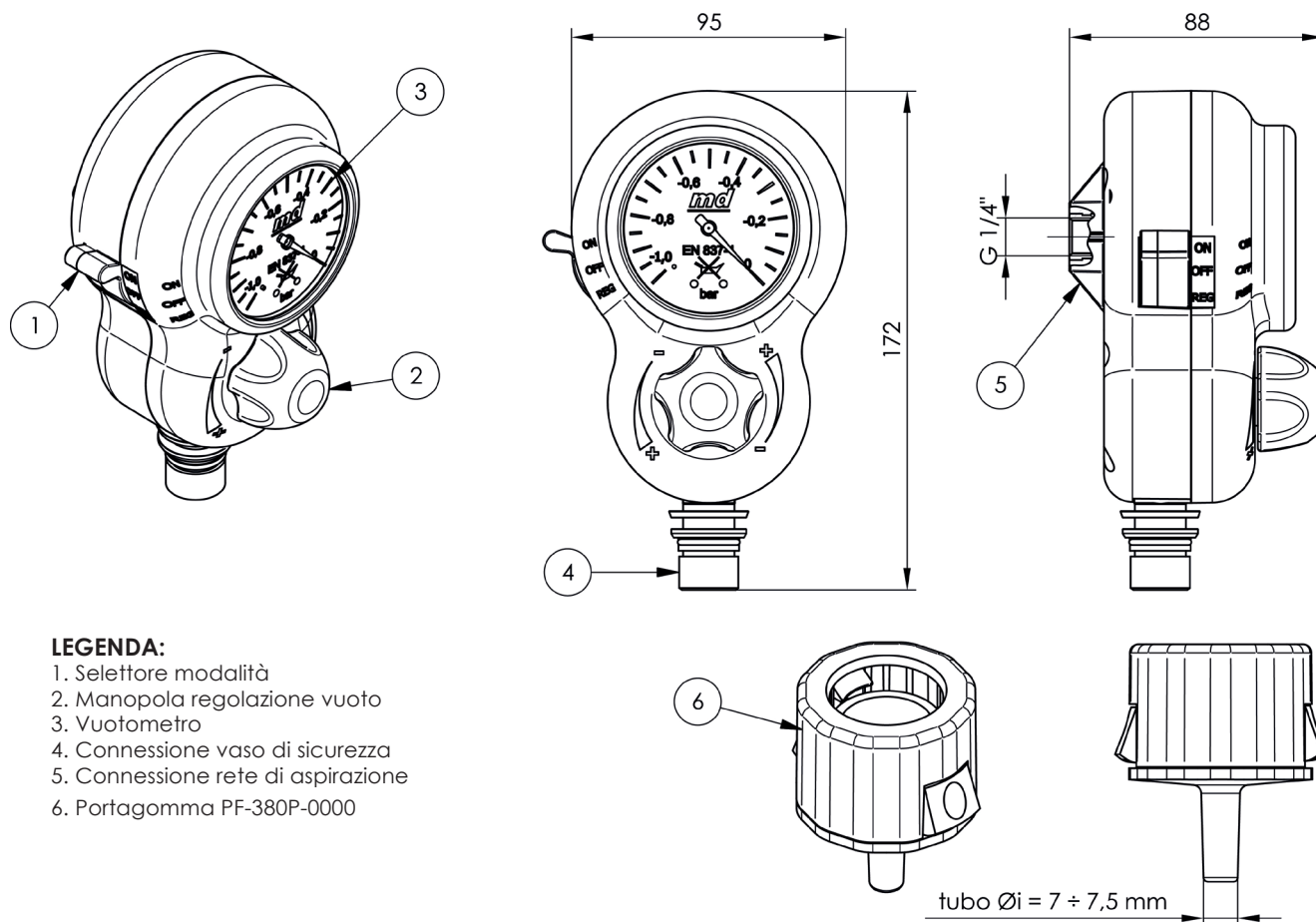

LEGENDA:

1. Selettore modalità
2. Manopola regolazione vuoto
3. Vuotometro
4. Connessione vaso di sicurezza
5. Connessione rete di aspirazione
6. Portagomma PF-380P-0000

- ▶ Gas: Vuoto
- ▶ Scala di regolazione disponibile:
 - 0 - 1000 mbar
 - 0 - 600 mbar
 - 0 - 250 mbar
- ▶ Classe di precisione vuotometro: 1.6

- ▶ Temperatura di utilizzo: +10 °C ÷ +40 °C
- ▶ Temperatura di stoccaggio: -20 °C ÷ +60 °C
- ▶ Pressione nominale di esercizio:
 $P \leq -0.4$ bar (P relativa)
- ▶ Attacco all'innesto: G1/4 " F

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLO		
		confezione	kg	pz
PF-38G0-1000	Regolatore del vuoto 0-1000 mbar	sacchetto	0.35	1
PF-38B0-2000	Regolatore del vuoto 0-250 mbar	sacchetto	0.35	1
PF-38B0-3000	Regolatore del vuoto 0-600 mbar	sacchetto	0.35	1
PF-380P-0000	Portagomma per regolatore del vuoto	sacchetto	0.03	1
PF-06UF-200V	Innesto UNI 9507 per regolatore del vuoto	sacchetto	0.10	1
PF-06AF-200V	Innesto AFNOR NF S 90-116 per regolatore del vuoto	sacchetto	0.10	1
PF-06DF-200V	Innesto DIN 13260-2 per regolatore del vuoto	sacchetto	0.10	1
PF-06BF-200V	Innesto BS 5682 per regolatore del vuoto	sacchetto	0.10	1

