




Tableau de secours et maintenance version standard

DESCRIPTION

- ▶ Tableau de contrôle général des lignes de distribution de gaz médical
- ▶ Réalisé sous coffrage externe en acier INOX AISI 430
- ▶ Point d'alimentation pour manœuvres d'urgence ou entretien de type NIST gaz spécifique, avec dispositif anti-retour
- ▶ Soupape de sécurité de protection de l'installation lors des opérations d'urgence
- ▶ Monitoring de la pression de ligne par transducteurs de pression ou pressostats (au choix)
- ▶ Manomètre d'indication de la pression de ligne

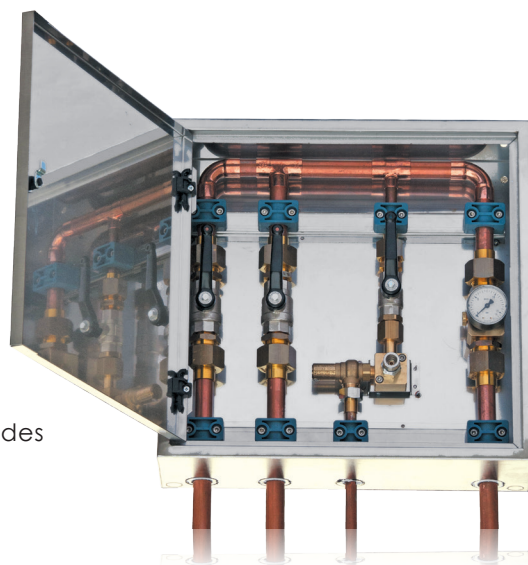

MARQUAGE CE

Organisme notifié: 0426

Marquage CE en classe de risque II B conformément au Décret législatif n°46 du 24 février 1997 «Application de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux» et amendements successifs

NORMES DE RÉFÉRENCE

ISO 7396-1: "Systèmes de distribution des gaz médicaux.
- Partie 1: Systèmes de distribution des gaz médicaux comprimés et de vide "

EN 15908: "Non- interchangeable screw- threaded (NIST)
low-pressure connectors for medical gases"

ISO 15001: "Matériel d'anesthésie et de réanimation
respiratoire – Compatibilité avec l'oxygène "

* La validité des normes se réfère à l'année en cours

PF-4900-0xxx ; PF-4901-0xxx VERSION STANDARD

- ▶ Rampe en cuivre. Prévue pour tuyaux en arrivée/sortie Ø=16x1 mm
- ▶ Calibrage soupape de sécurité*
- ▶ Classe de précision et échelle de manomètres: 2,5 ; 0 ÷ 16 bar
- ▶ Débit soupape de sécurité Q= 365 Nm³/h (Air)
- ▶ Raccordement pour transducteur de pression: G 1/4"
- ▶ Raccordement pour pressostat: 1/8" NPT


*14 bar pour centrales 1ère détente Ref. PF-4900-1XXX
5,5 bar pour centrales double détente Ref. PF-4901-1XXX





Tableau de secours et maintenance version standard

DIMENSIONS

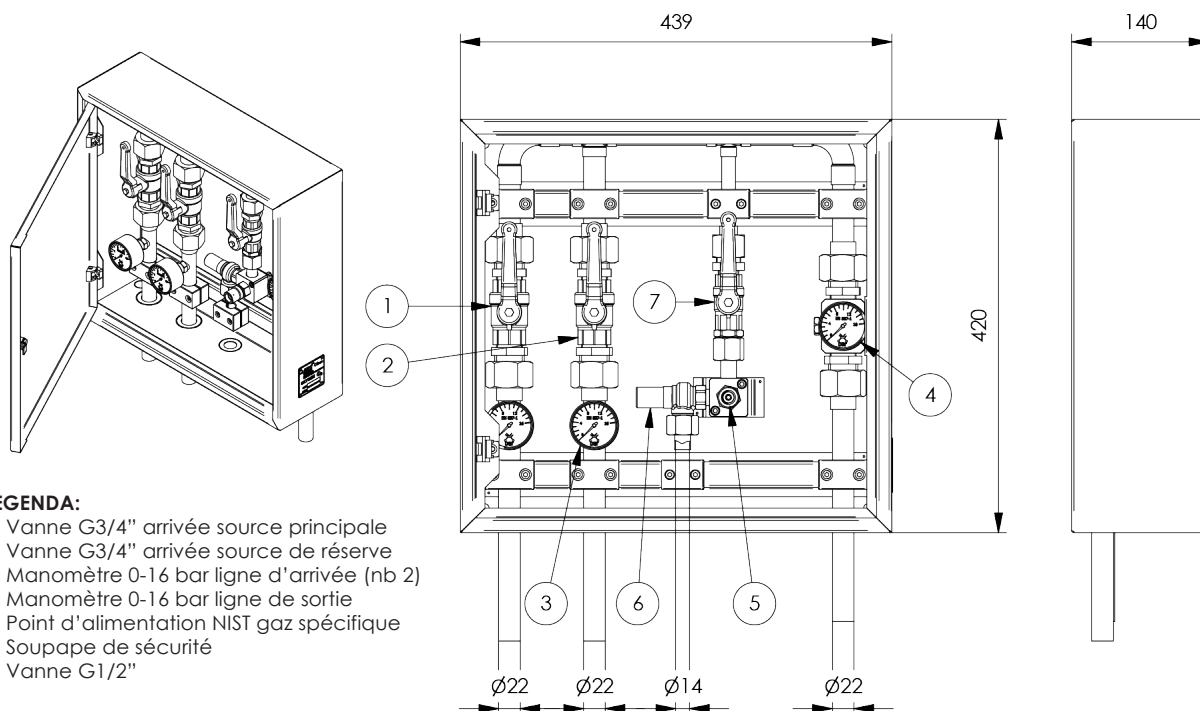

LEGENDA:

1. Vanne G3/4" arrivée source principale
2. Vanne G3/4" arrivée source de réserve
3. Manomètre 0-16 bar ligne d'arrivée (nb 2)
4. Manomètre 0-16 bar ligne de sortie
5. Point d'alimentation NIST gaz spécifique
6. Soupape de sécurité
7. Vanne G1/2"

CODE	GAZ	VERSION	OPTIONS		EMBALLAGE		
			PRESSOSTAT	TRANSDUCTEUR DE PRESSION	 conditionnement	 cm	 Kg
PF-4900-00O2	O ₂	STANDARD	6,4-9,6 bar KT-2200-2000*	0-16 bar KT-2210-0016	boîte	20,0 x 48,0 x 49,9	18
PF-4900-00AC	Air						
PF-4900-0N2O	N ₂ O						
PF-4900-0CO2	CO ₂						
PF-4901-00O2	O ₂		3,2-4,8 bar KT-2200-1000*				
PF-4901-00AC	Air						
PF-4901-0N2O	N ₂ O						
PF-4901-0CO2	CO ₂						

* Connecteur exclu.

Disponibles: connecteurs avec câble L = 1,5 m (code MP-2200-3000) et L = 2,5 m (code MP-2200-4000).

